

HN-283

Digitaalne personaalkaal

• Kasutusjuhend

EE

Täname teid, et ostate endale OMRONi digitaalse personaalkaalu.
Enne selle kaalu esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja kasutage kaalu vastavalt juhenditele.
Palun hoidke seda kasutusjuhendit alati käepärast edaspidiseks kasutamiseks.

HN-283

Digitaalne personaalkaal

Hea klient!

Täname teid, et ostsite endale OMRONI digitaalse personaalkaalu.

Toote omadused

- **Suur täpsus**

Väikseim kuvatav ühik on 0,1 kg.
Tuvastada saab isegi kerge kaalumutuse.

- **Suur LCD-ekraan (35 mm)**

- **Astumispind on tehtud parimast karastatud klaasist.**

- **Sisesehitatud TAP ON toitelüliti**

Kaalu lülitab sisse kerge jalavajutus astumispinna parema või vasaku külje all olevatele osadele.

- **Automaatne väljalülitamine**

Kaalumise lõpetamisel lülitub kaal välja 6 sekundi möödumisel.



Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne kasutamist ja üksikute funktsioonide kohta täiendava informatsiooni saamiseks

Palun säilitage seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage kaalu muuks otstarbeks peale juhendis kirjeldatute.

Sisukord

Enne kaalu kasutamist

Ohutusalsed märkused 2

Kasutusjuhised

1. Kaalu tutvustus 3

2. Patareide sisestamine ja vahetamine 3

3. Mõõtmine 4

Korrashoid ja hooldus

4. Veanäidud 4



5. Veotsing ja lahendamine 4

6. Kaalu hooldamine ja hoiustamine 5

7. Tehnilised andmed 5

Ohutusalsed märkused

Märgised ja nende selgitused on järgmised:

 Hoiatus!	Ebaõige kasutamine võib lõppeda surma või ohtliku vigastusega.
 Ettevaatust!	Ebaõige kasutamine võib lõppeda vigastustega või varalise kahjuga.

Hoiatus!

- Enne kaalulangetamise või treeningravi alustamist pidage alati nõu arsti või muu spetsialistiga.
- Ärge kasutage kaalu libedal pinnal, näiteks märjal põrandal.
- Hoidke kaalu lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge hüpake kaalu peale ega kaalul üles-alla.
- Ärge kasutage kaalu, kui teie keha ja/või jalad on märjad (nt pärast vanni).
- Ärge seiske kaalu serval või näidikuala peal.
- Puudega või füüsiliselt nõrgad inimesed peaksid kaalu kasutamisel alati kasutama teise inimese abi. Kaalule astudes kasutage käetuge või midagi sarnast.
- Kui patareivedelik satub silma, loputage silmi viivitamatult rohke puhta veega. Konsulteerige viivitamatult arstiga.
- Ärge pange oma sõrmi mitte ühegi ava ega kaalu sisse.
- Kasutage ruumisiseselt.
- Ärge kasutage muuks otstarbeks peale kaalumise.

Ettevaatust!


- Ärge võtke kaalu koost lahti, ärge parandage ega muutke seda.
- Ärge kasutage kaaluga mittesobivaid patareisid. Ärge asetage patareisid seadmesse nende polaarsusele mittevastavalt.
- Asendage vanad patareid kohe uutega.
- Ärge hävitage patareisid neid põletades.
- Kui patareivedelik satub nahale või riietele, loputage viivitamatult rohke puhta veega.
- Kui te ei kasuta kaalu pikema aja jooksul (umbes kolm kuud või enam), võtke patareid välja.
- Ärge kasutage koos erinevat tüüpi patareisid.
- Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
- See kaal on ette nähtud vaid koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks haiglates või teistes meditsiiniastutustes. See ei vasta professionaalse kasutamise puhul nõutud kvaliteedistandarditele.

Üldine soovitus:


- Ärge asetage kaalu pehmele põrandakattele, näiteks vaibale või matile. Nii ei pruugi saada õigeid tulemusi.

1. Kaalu tutvustus

Pealtvaade

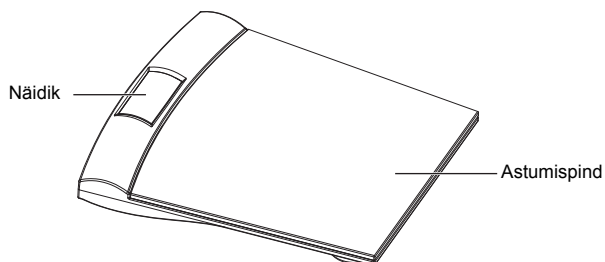


Allvaade

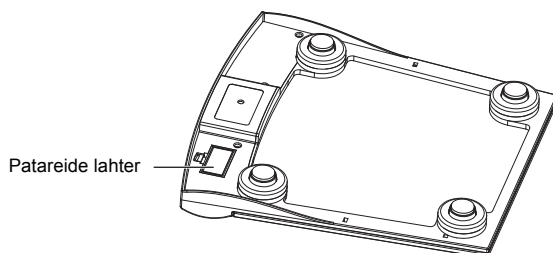


2. Patareide sisestamine ja vahetamine

Patareid on juba kaalu sisestatud. Kaalu esmakordsel kasutamisel tõmmake punane kile välja.

1. Avage kaalu tagaküljel olev patareiluuk.

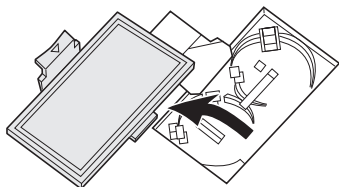


2. Sisestage patareid õige polaarsusega, + poolusega ülespoole.

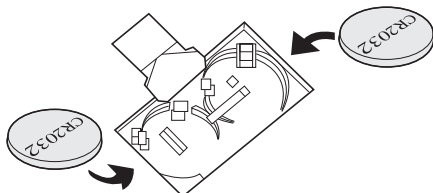

3. Sulgege patareiluuk.

Patareide tööiga ja nende vahetamine

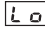Kui ilmub  , asendage mõlemad patareid uutega.

- Kasutatud patareid tuleb hävitada vastavalt asjakohastele kohalikele seadustele.
- Kahe CR2032 patarei tööiga on umbes 1 aasta (kui mõõtmisi teostatakse kolm korda päevas).
- Seadmega kaasasolevad patareid on mõeldud proovikasutamiseks, seetõttu võib nende tööiga olla lühem.

3. Mõõtmine

Mõõtmisi tuleks läbi viia tasasel ja kõval pinnal.

1. Kaalu sisselülitamiseks vajutage astumispinna parema ja vasaku külje all olevatele osadele, seejärel tõstke jalg astumispinnalt ära.



Kuvatakse .

Märkus: Kui te jätate jala astumispinnale, ei tule mõõtmistulemused õiged.

2. Kui ekraanile ilmub , astuge kaalule (palun astuge kindlasti kaalu keskele).

Algab kaalumine. Tulemusi näidatakse siis, kui kuvatakse järjestikku.

Märkused:

- Õige kaalumistulemuse saamiseks oodake kuni ekraanile ilmub ja alles siis astuge kaalult maha.
- Kui kaalu ei kasutata 10 sekundi jooksul peale ilmumist ekraanile, lülitub kaal ise automaatselt välja.

3. Kontrollige mõõtetulemusi.

Kaal lülitub automaatselt välja 6 sekundi pärast.

Märkus: Kui tulemus on pärast

kuvamist ikka ebastabiilne, kordub

tsükli kuvamine, kuni mõõtmine stabiliseerub ja kuvatakse tulemus. Kuid kui see protsess kestab kauem kui 10 sekundit ja tulemust ikka ei kuvata, lülitub kaal automaatselt 3 sekundi pärast välja peale teadet "Err".

4. Veanäidud

Veanäit	Põhjus	Kuidas toimida
	Kaalu piirmäär on ületatud (rohkem kui 150 kg).	
	Te ei tõstnud jalga pärast kaalu sisselülitamist astumispinnalt ära.	Tõstke esmalt jalg astumispinnalt ära, kui kaal on sisse lülitatud.

5. Veaotsing ja lahendamine

Probleem	Mida tuleks kontrollida	Kuidas toimida
Kaal ei saa sisse lülitada	Kas kaal on asetatud tasasele pinnale?	Palun asetage see kasutamiseks tasasele ja kõvale pinnale.
	Patareid võivad olla tühjad.	Palun asendage patareid uutega.
	Kas patareid on valesti sisestatud?	Palun sisestage patareid nii, nagu näidatud 2. peatükis. "Patareide sisestamine ja vahetamine".
Kuvatakse normist kõrvalekalduvaid tulemusi	Kas kaal on asetatud tasasele pinnale?	Palun asetage see kasutamiseks tasasele ja kõvale pinnale.
	Kas teie jalg oli kaalul veel pärast seda, kui te lülitasite kaalu jalavajutusega sisse?	Palun tõstke jalg koheselt kaalult pärast selle sisselülitamist jalavajutusega. (Lugege "3. Mõõtmine")

6. Kaalu hooldamine ja hoiustamine

See digitaalne personaalkaal ei nõua mingit hooldust.

Kaalu puhastamine

- Hoidke kaal enne kasutamist alati puhtana.
- Pühkige kaalu pehme kuiva lapiga.
Vajadusel kasutage veega või puhastusvahendiga niisutatud lappi ja väänake seda enne kaalu pühkimist hoolikalt, seejärel kuivatage kuiva lapiga.
- Ärge kasutage kaalu puhastamiseks benseeni või lahustit.
- Ärge peske kaalu veega.

Hooldus ja hoiustamine

- Ärge hoidke kaalu järgmistes tingimustes:
 - Niisketes kohad, kus kaalu sisse võivad sattuda niiskused ja vesi.
 - Kõrged või madalad temperatuurid, nagu otsene päikesevalgus, õhukonditsioneer all või tolmused kohad.
 - Kohtades, kus on järskude löökide või vibratsioonide oht.
 - Kohtades, kus hoitakse kemikaale või kus leidub korrodeerivaid gaase.
- Ärge tehke ise mingeid parandustöid. Vea tekkimisel konsulteerige OMRONi edasimüüja või klienditeenindusega, nagu pakendil mainitud.
- Asjad, mis on jäetud astumispinnale pikaks ajaks, hoiavad kaalu sisselülitatuna ja kulutavad patareisid.

7. Tehnilised andmed

Nimi	HN-283
Toode	Digitaalne personaalkaal
Mudel	HN-283-E
Näidik	5 kuni 150 kg, sammuga 0,1 kg
Kaalumise täpsus	5,0 kg kuni 40,0 kg: $\pm 0,4$ kg 40,0 kg kuni 150,0 kg: $\pm 1\%$
Vooluallikas	Kaks CR2032 patareid (lisatud on kaks proovipatareid)
Patareide tööiga	Umbkaudu 1 aasta (kui kasutatakse mangaanpatareisid ning päevas tehakse kolm mõõtmist)
Töötemperatuur ja niiskus	+10°C kuni +40°C, 30% kuni 85% RH
Hoiustamistemperatuur, niiskus ja õhurõhk	-20°C kuni +60°C, 10% kuni 95% RH, 700 hPa - 1060 hPa
Kaal	Umbkaudu 1,4 kg (ilma patareideta)
Välised mõõtmed	Umbkaudu 300 (L) × 40 (K) × 320 mm (D)
Pakendi sisu	Digitaalne personaalkaal, kaks CR2032 patareid kaalu proovikasutamiseks, kasutusjuhend

Märkus: Tootja jätab endale õiguse tehnilisi näitajaid muuta ette teatamata.

See toode vastab EMÜ Direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele.

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. annab tootele kaheaastase garantii alates ostukuupäevast. Garantii ei kehti patareidele, pakendile ja/või mis tahes kahjustustele, mis on põhjustatud kasutaja-poolsest väärkasutusest (näiteks mahapillamine või füüsiline väärkasutus). Toode, mille suhtes on kaebusi, asendatakse vaid juhul, kui see tagastatakse koos originaalarvega / kassatšekiga.





**Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks
(Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)**

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalse vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või kohalikust keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

See toode ei sisalda ohtlikke aineid.

Kasutatud akude kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas akude likvideerimist reguleerivate riiklike eeskirjadega.

<p>Tootja</p> 	<p>OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084, Jaapan</p>		
<p>Esindaja Euroopa Liidus</p> <table border="1" data-bbox="128 1466 311 1544"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	<p>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, Holland www.omron-healthcare.com</p>
EC	REP		
<p>Tütarettevõtte</p>	<p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, Ühendkuningriik</p> <p>OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH. John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, Saksamaa www.omron-medizintechnik.de</p> <p>OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, Prantsusmaa</p>		